


# Ivoclean

Limpieza después de la prueba



| Efectivo. | Universal. | Sencillo.

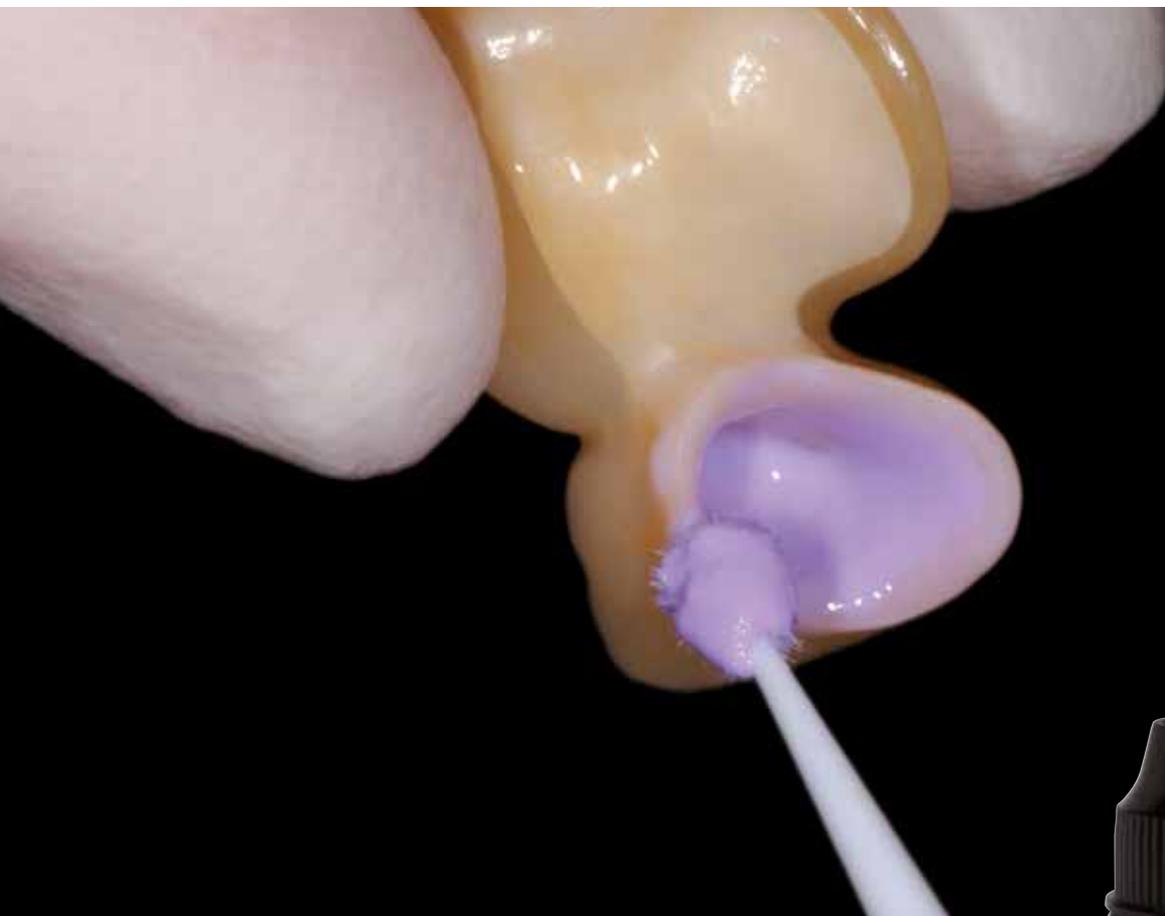


# Ivoclean

La pasta de limpieza universal Ivoclean limpia de manera efectiva las superficies de unión de las restauraciones tras la prueba intraoral y por tanto cumple de manera óptima con los prerequisites para el procedimiento de cementación.

Durante la prueba intraoral es imposible evitar la contaminación con saliva de las superficies de la restauración. Sin embargo, esta contaminación puede suponer un problema cuando la restauración fabricada en el laboratorio va a cementarse adhesivamente a continuación.

El uso de gel de ácido fosfórico para limpiar las superficies de unión de restauraciones contaminadas con saliva está contraindicado cuando se trata de restauraciones de óxido de cerámica o de metal debido al efecto desactivador que el gel de ácido fosfórico genera en estas superficies. Tan solo podría usarse gel de ácido fosfórico para limpiar superficies de cerámicas vítreas contaminadas con saliva.

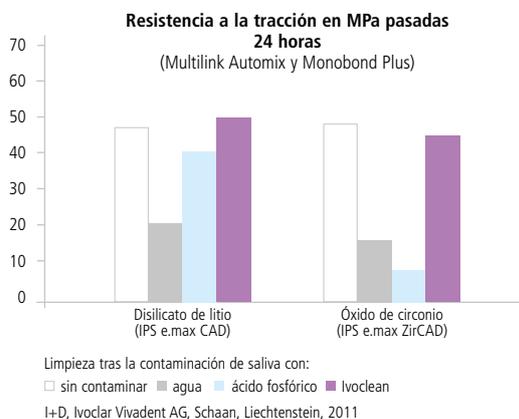

## EFFECTIVO.

Ivoclean le permite limpiar de manera efectiva las superficies de unión contaminadas con saliva y por lo tanto crea la base para una adhesión duradera y fuerte entre el material de cementación adhesiva y la restauración.

## UNIVERSAL

Ivoclean es efectivo en todo tipo de materiales:

- Cerámica vítrea
- Cerámicas de óxido de circonio
- Cerámicas de óxido de aluminio
- Aleaciones de metal precioso
- Aleaciones de metal
- Restauraciones de composite fabricadas en el laboratorio

## SENCILLO

Simplemente aplique Ivoclean en la superficie de unión de la restauración, déjelo actuar durante 20 segundos y entonces enjuáguelo con agua. A continuación, seque la superficie de unión de la restauración con aire libre de aceites.



Probar



Aplicar Ivoclean y dejar reaccionar durante 20 segundos



Enjuagar



Secar



Estos productos forman parte de la categoría de producto "Prótesis Removibles". Los productos de esta categoría están óptimamente coordinados entre sí.

## Formato de suministro

Refill 637568AN

1 Bote de Ivoclean 5g

**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35  
Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

**Ivoclar Vivadent S.L.U.**  
Carretera de Fuencarral nº24  
Portal 1 – Planta Baja  
28108-Alcobendas (Madrid)  
España  
Tel. +34 91 375 78 20  
Fax +34 91 375 78 38  
[www.ivoclarvivadent.es](http://www.ivoclarvivadent.es)

Las descripciones y datos no constituyen garantía de atributos  
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan Liechtenstein

2016-05-24/ES

**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation