

SR Phonares® II

Ausdrucksstark ästhetische Prothesenzähne

Natürliche Zahnformen für
gehobene Ansprüche.



NATÜRLICH –
NATURGETREU

SR Phonares® II

Ausdrucksstarke Ästhetik

Höchster Anspruch

Der Prothesenträger von heute hat sich verändert; seine Ansprüche sind gestiegen. So ist ein natürlich aussehender Zahnersatz beispielsweise zu einem wichtigen Kriterium geworden. Um diese Anforderung zu erfüllen, werden heute oft implantatgetragene Lösungen realisiert. Beim implantatgetragenen Zahnersatz kann sich die Kaukraft allerdings erheblich erhöhen. Die Festigkeit des Materials und somit seine Toleranz spielen daher in dieser Indikation eine wesentliche Rolle.

Die Materialentwicklung

Das NHC-Material von SR Phonares II besitzt eine hohe Zähigkeit. Dadurch überzeugt es vor allem durch eine gute Abrasionsresistenz sowie ein tolerantes und widerstandsfähiges Verhalten.

Natürliche Farbwirkung

Die Brechungsindizes der verschiedenen Füller sind aufeinander abgestimmt; das unterstützt die natürliche Farbwirkung des Materials und erleichtert die Farbwahl der Restauration.

Optimale Farbwahl

Die Bestimmung der optimalen Farbe erfolgt mit dem SR Phonares II-Farbschlüssel, der in Schichtung und Material mit den Zähnen übereinstimmt. Farbabweichungen bei der Farbwahl sind dadurch nahezu ausgeschlossen. Für eine allgemeine Farbwahl eignet sich alternativ auch der A–D Shade Guide mit Bleach-Farben.

Die SR Phonares II-Zähne sind in 16 A–D- und vier Bleach-Farben erhältlich.



- UDMA-Matrix
- Verdichtetes silanisiertes SiO₂
- Anorganisch gefülltes UDMA-Polymer
- Silanisiertes SiO₂-Partikel
- PMMA-Cluster



NATÜRLICHE FRONTZÄHNE

SR Phonares® II

Die Zahnformen von SR Phonares II stehen für ein Maximum an purer Schönheit und vitaler Ausstrahlung im Frontzahnbereich. Sie sind so ausdrucksstark wie ihr menschliches Vorbild und eröffnen sehr gute Möglichkeiten bei der Herstellung naturinspirierter Restaurationen.

Aufregende Ästhetik

- Einzigartige Oberflächentextur
- Harmonische Anteile an Transluzenz, Opaleszenz und Fluoreszenz




Beeindruckende Funktion

- Anatomisch geschlossene Approximalbereiche für eine natürlich gestaltete „weisse Ästhetik“
- Besonders einfache Frontzahnaufstellung durch approximale „Set & Fit“-Modellation



Individuelle Zahnschichtungen

Zahnformspezifisch entwickelte Schichtungen unterstreichen die Charakteristik jeder einzelnen Form. Dank der neuartigen Injektionstechnik lassen sich die einzelnen Schichten bereits in der Produktion unsichtbar miteinander verschmelzen. Die natürliche Wirkung wird somit optimal unterstützt.

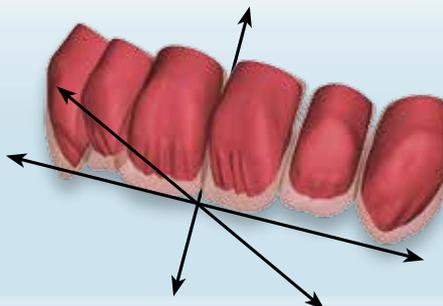

ALTERS- UND TYPENGERECHTES ZAHNFORMEN-KONZEPT



- Natürlich geformte Inzisalkante
- Ausgeprägte Facialkrümmung

- Leichte Abrasion der Inzisalkante
- Wenig ausgeprägte Facialkrümmung

- Ausgeprägte Abrasion der Inzisalkante
- Geringe Facialkrümmung

Einfach kombinierbar

SR Nexco® – das pastenförmige Labor-Composite. Es ist farblich exakt auf SR Phonares II abgestimmt. Dies erleichtert die Kombinationsprothetik erheblich.

IvoBase® – das präzise, vordosierte Prothesenbasismaterial. Mit diesem Material erhält der abnehmbare Zahnersatz eine sehr hochwertige Qualität.



Oberkiefer-Totalprothese, Unterkiefer-Kombinationsarbeit mit Teleskopkronen

Lieferformen

SR Phonares® II

- 18 Oberkiefer-Frontzahnformen
- 6 Unterkiefer-Frontzahnformen



UNIVERSELLE SEITENZÄHNE

SR Phonares® II Typ

SR Phonares II Typ ist vielseitig einsetzbar und somit der Klassiker für Total- und Teilprothetik.

Die einfache Zuordnung antagonistischer Zähne macht ihn besonders wirtschaftlich.

Klassische Okklusion



Interkuspitation



„Zahn-zu-zwei-Zahn“-Aufstellung

Lieferformen

SR Phonares® II Typ

- 3 Oberkiefer-Garnituren
- 3 Unterkiefer-Garnituren



SEITENZAHN TYP UND LINGUAL

Zeitsparendes Basal-Design

Die anatomisch vorgeformte Zahnbasis lässt sich einfach an den Kieferkamm anpassen oder auf das Konstruktionselement aufschleifen.

Breite Facial- und Zahnhalsgestaltung

Diese Dimensionen sind ideal zur Überdeckung von Implantat-Abutments und anderen Konstruktionselementen.

IMPLANTATGETRAGENE SEITENZÄHNE

SR Phonares® II *Lingual*



SR Phonares II Lingual wurde speziell für das lingualisierte Okklusionskonzept entworfen. Dieses wird vermehrt in der Hybrid- und Implantat-Prothetik eingesetzt.

Die ideale Verteilung der Kräfte in Verbindung mit einem besonders abrasionsfesten Material schafft die Grundlage für eine lange Lebensdauer.



Lingualisierte Okklusion

Interkuspitation




„Zahn-zu-Zahn“-Aufstellung



„Zahn-zu-zwei-Zahn“-Aufstellung

Lieferformen

- SR Phonares® II *Lingual*
- 3 Oberkiefer-Garnituren
- 3 Unterkiefer-Garnituren

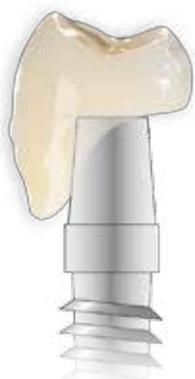



Abnehmbare Prothetik

SR Phonares® II ist ein Produkt aus der Kategorie „Abnehmbare Prothetik“. Produkte aus dieser Kategorie decken den Prozessablauf bei der Fertigung der abnehmbaren Prothetik ab – von der Planung und Abformung bis zur Nachsorge. Die Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine erfolgreiche Verarbeitung und Anwendung.



DIES SIND WEITERE PRODUKTE AUS DIESER KATEGORIE:

Stratos®

Die bewährten Artikulatoren



Überzeugende Qualität und Präzision

Funktionssimulation für hochwertige Restaurationen im Bereich der abnehmbaren und festsitzenden Prothetik.

Prothesenmaterial

Einfach und sicher anwendbar



Beeindruckende Vielfalt und Präzision

- Vordosiert oder konventionell für mehr Anwendungskomfort
- Verfügbar für Injektions-, Stopf- oder Giesstechnik
- Erfüllt unterschiedlichste Ansprüche an die Festigkeit

Sie wollen mehr über Produkte aus der Kategorie „Abnehmbare Prothetik“ wissen? Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner von Ivoclar Vivadent oder informieren Sie sich auf: www.ivoclarvivadent.com

Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG
 Benderstr. 2
 9494 Schaan
 Liechtenstein
 Tel. +423 / 235 35 35
 Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland
Ivoclar Vivadent GmbH
 Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
 D-73479 Ellwangen, Jagst
 Tel. +49 (0) 79 61 / 8 89-0
 Fax +49 (0) 79 61 / 63 26
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften.
 © Ivoclar Vivadent AG, Schaan
 644129/der/2013-02-14

ivoclar
vivadent
 passion vision innovation