

IPS InLine®

IPS InLine® Konventionelle Metallkeramik

IPS InLine® PoM Press-on-Metal Keramik



IPS InLine® / IPS InLine® PoM Opaquer F
für mehr Fluoreszenz



ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

IPS InLine® / IPS InLine® PoM Opaquer F

Faszinierende Lichtdynamik

Unser Auge erfasst selbst kleinste Licht- und Farbspiele. Durch dieses stetige Wechselspiel von Licht wird Lebendigkeit geschaffen.

Deshalb benötigen wir zur Imitation gesunder Zähne Materialien, die über eine naturidentische Verteilung der Fluoreszenzstoffe verfügen.



Natürlicher Molarenzahn bei Schwarzlicht fotografiert.

Volker Brosch, Essen (Deutschland)

Verstärkte Fluoreszenz

Neu gibt es den Opaquer F in der 1 g Spritze, mit dem Sie die Fluoreszenzwirkung aus der Tiefe noch verstärken können. Fluoreszenz finden Sie in all unseren IPS InLine Materialien.

Ganz unkompliziert können Sie mit dem Opaquer F ausdrucksstarke ästhetische Effekte mit Tiefenwirkung erzielen. Dank der erhöhten Fluoreszenz scheint die Restauration aus dem Innern heraus zu leuchten.

So einfach funktioniert:

Entweder: Den Opaquer F als dünne, dritte Opaquerschicht auftragen und brennen.

Oder: Vor dem zweiten Auftrag den herkömmlichen IPS InLine/IPS InLine PoM Opaquern bis zu 20 % Opaquer F zumischen.


Der IPS InLine/IPS InLine PoM Opaquer F, die gemischte Paste und die bestehenden Opaquer werden bei 930 °C gebrannt.

Lieferformen

IPS InLine/IPS InLine PoM Opaquer F 1 g



Die 16 A–D, 20 Chromascope und zwei Bleach-Pasten Opaquer sind in der 3 g Spritze und in der 9 g Dose erhältlich.

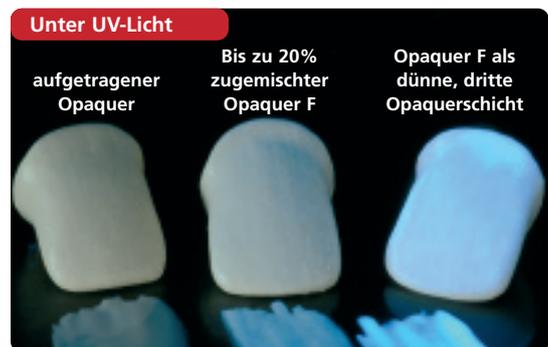

Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein

Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 (0) 79 61 / 8 89-0
Fax +49 (0) 79 61 / 63 26
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

ivoclar
vivadent
passion vision innovation