

# Programat<sup>®</sup>-App

Mit der App haben Sie Ihren Programat<sup>®</sup> immer fest im Griff

**NEU:** Mit vielen  
zusätzlichen Funktionen



# Programat®-App


Mit der App haben Sie Ihren Programat® immer fest im Griff

Die App bietet Anwendern der neuesten Programat®-Generation (xx10) die Möglichkeit, mit den Öfen via WLAN zu kommunizieren. Statusanzeige, Diagnosetools, Messenger-Funktion, DSA-Bildanalyse, Picture Manager, Bilddatenübertragung via WiFi sind nur einige Stichworte für den Mehrwert, den diese neue App bietet.




## Statusanzeige

Mit der Statusanzeige kann der Fortschritt des aktuellen Brennprogrammes beobachtet werden. Durch Drehen des Smartphones erscheint eine farbige Brennkurve.

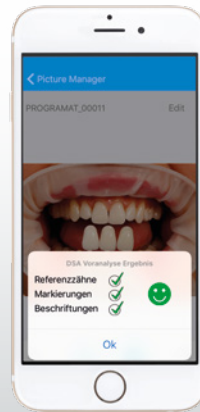


## Prüffunktion für DSA-Bildanalyse

Mithilfe dieser Funktion überprüfen Sie, ob alle notwendigen Anforderungen für die DSA-Analyse auf dem Foto erfüllt werden. Ist das der Fall, erscheint auf der Anzeige eine positive Rückmeldung. Dann können Sie das Bild zur DSA-Analyse an den Ofen senden.

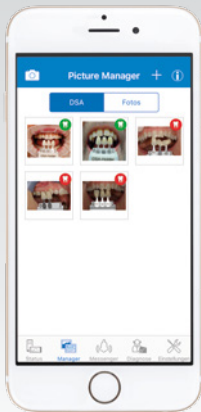

## Picture Manager für die Bildverwaltung

Mit dem Picture Manager verwalten Sie ganz einfach Ihre Fotos. Sie können die DSA-Fotos und Ihre normalen Fotos in zwei verschiedenen Ordnern ablegen. In diesem Bildmodus wird in der oberen, rechten Ecke ein Symbol angezeigt, ob das Bild für die DSA-Analyse verwendet werden kann.

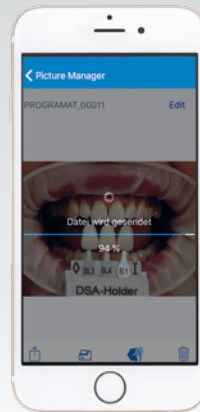

## Drahtlose Bilddatenübertragung via WiFi

Fotos können dank dieser Funktion ganz einfach und bequem vom Smartphone drahtlos an den Programat-Ofen geschickt werden. Sie benötigen dafür lediglich eine WiFi-Verbindung.

## Weitere Funktionen

- Diagnose-Funktion zum Auslesen der Diagnosedaten
- Messenger-Funktion für Benachrichtigungen

Laden Sie die App kostenlos aus dem App Store auf Ihr Smartphone. Die einfache Bedienung wird Sie begeistern. Kompatibel mit Programat P310/P510 ab Software-Version V2.1 und mit Programat EP 3010/EP 5010 ab Version V1.1

Folgende Systeme werden unterstützt: iOS\*, Android\*

\*Das sind keine eingetragenen Warenzeichen der Ivoclar Vivadent AG.



Die IPS e.max Shade Navigation App ist die intelligente Block-/Rohling-/Disc-Auswahl App für Android- oder iOS-Smartphones und Tablets. Die App berücksichtigt alle wichtigen Einflussfaktoren und ermöglicht so eine sehr genaue Transluzenz- und Farb-Empfehlung.

Hersteller und Vertrieb  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Benderstr. 2  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35  
Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Vertrieb Deutschland  
**Ivoclar Vivadent GmbH**  
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2  
73479 Ellwangen, Jagst  
Tel. +49 7961 8890  
Fax +49 7961 6326  
[info@ivoclarvivadent.de](mailto:info@ivoclarvivadent.de)  
[www.ivoclarvivadent.de](http://www.ivoclarvivadent.de)

Darstellungen und Angaben  
enthalten keine Zusicherung  
von Eigenschaften.  
Gedruckt in Österreich  
© Ivoclar Vivadent AG  
672882/de/2017-03

**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation