

# Digital Shade Assistant

Einfach und bequem zur richtigen Zahnfarbe



Zahnfarbe erkennen –  
einfach und zuverlässig




**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation

# Digital Shade Assistant

Mit dem Digital Shade Assistant Starter-Kit in Kombination mit dem Programat P710 können Sie in Zukunft die Zahnfarbe in Verbindung mit der digitalen Technik ganz einfach und zuverlässig bestimmen. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Zahnfarbe falsch ausgesucht wurde. Die Zahnfarbe kann nun mit diesem DSA-Starter-Kit einfach bestimmt und überprüft werden.



Und so einfach geht's:

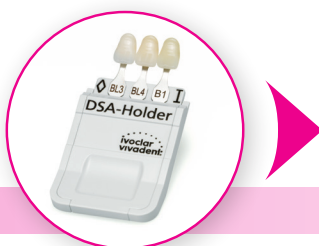

1. Wählen Sie die drei ähnlichen Farbschlüsselzähne\* aus.

2. Digital Shade Assistant-Halter mit den Referenz-Farbschlüsselzähnen bestücken

3. DSA-Halter am Patienten positionieren  
4. Erstellen Sie ein digitales Foto mit dem richtigen Ausschnitt.

\* Das Digital Shade Assistant System ist ausschliesslich mit folgenden Farbschlüsseln kompatibel:  
• Ivoclar Vivadent A-D Shade-Guide  
• Ivoclar Vivadent Chromascop-Farbschlüssel



5. Übertragen Sie die Fotodaten in den Programat P710 und führen Sie den Farbvergleich mit der DSA-Funktion durch



Dies ist ein Produkt aus unserer Kategorie Festsitzende Prothetik. Produkte aus dieser Kategorie sind jeweils optimal aufeinander abgestimmt.



Lieferumfang:  
**679917 Digital Shade Assistant-Starter-Kit**  
1 Stück Farbschlüssel (A-D)  
3 Stück DSA-Halter  
1 Stück Kurzanleitung

Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften.  
Gedruckt in Österreich  
© Ivoclar Vivadent AG  
680313/de/2015-04-08

Hersteller und Vertrieb  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35  
Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Vertrieb Deutschland  
**Ivoclar Vivadent GmbH**  
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2  
D-73479 Ellwangen, Jagst  
Tel. +49 7961 8890  
Fax +49 7961 6326  
[info@ivoclarvivadent.de](mailto:info@ivoclarvivadent.de)  
[www.ivoclarvivadent.de](http://www.ivoclarvivadent.de)

**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation