

Massenübersicht IPS Style®



**MAKE IT
STYLE!
YOUR!**

Produktbeschreibung:

IPS Style® Ceram

Powder Opaquer / Paste Opaquer

IPS Style Ceram Opaker stehen in Pasten- und Pulverform zur Verfügung. Die lichtundurchlässigen Keramikmassen sorgen dank des hohen Gehalts an Oxyapatit-Kristallen für eine gute Abdeckung des Metallgerüsts.

IPS Style® Ceram

Intensive Powder Opaquer / Paste Opaquer

IPS Style Ceram Intensive Powder Opaquer bzw. Intensive Paste Opaquer sind lichtundurchlässige Keramikmassen. Sie dienen der Individualisierung der Opaker-Basisfabe. Labial und okklusal appliziert geben sie der Restauration insbesondere bei schwierigen Platzverhältnissen Tiefe.

IPS Style® Ceram

Margin

IPS Style Ceram Marginmassen haben eine etwas höhere Opazität und mehr Fluoreszenz als IPS Style Ceram Dentin und ermöglichen die Gestaltung keramischer Schultern.

IPS Style® Ceram

Intensive Margin

IPS Style Ceram Intensive Marginmassen werden zur individuellen Gestaltung der Keramikschulter verwendet. Sie können den Marginmassen beigemischt oder unvermischt aufgetragen werden.

Anwendungsbeispiel:



Farbangebot:

O BL1/BL2, O BL3/BL4, O A1, O A2, O A3, O A3.5, O A4, O B1, O B2, O B3, O B4, O C1, O C2, O C3, O C4, O D2, O D3, O D4, O pink

IO white, IO violet, IO brown, IO incisal

MBL, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7

IM yellow, IM orange-pink, IM opaque, IM orange

IPS Style® Ceram
Deep Dentin

IPS Style Ceram Deep Dentin sind opak eingefärbte Dentinmassen, die an Stellen mit geringen Schichtstärken und an inzisalen Gerüstenden platziert werden. Dies kaschiert lichtoptische „Abrisskanten“ und unterstützt dabei, farblich naturkonforme Resultate zu erzielen.



DD BL1/BL2, DD BL3/BL4, DD A1, DD A2, DD A3, DD A3,5, DD A4, DD B1, DD B2, DD B3, DD B4, DD C1, DD C2, DD C3, DD C4, DD D2, DD D3, DD D4

IPS Style® Ceram
Dentin

IPS Style Ceram Dentinmassen sind in Farbe und Transparenz entsprechend dem natürlichen Dentin eingestellt. So kann die ausgewählte Dentinfarbe exakt wiedergegeben werden.



D BL1, D BL2, D BL3, D BL4, D A1, D A2, D A3, D A3.5, D A4, D B1, D B2, D B3, D B4, D C1, D C2, D C3, D C4, D D2, D D3, D D4

IPS Style® Ceram
Mamelon

IPS Style Ceram Mamelonmassen sind farbtintensive, opake Effektmassen zur Akzentuierung des inzisalen Drittels. Sie werden je nach Verarbeitungsgewohnheit in dünnen Streifen auf das reduzierte Dentin aufgetragen.



MM light, MM salmon, MM yellow-orange

IPS Style® Ceram
Opal Effect

IPS Style Ceram Opal Effectmassen sind speziell eingefärbte Schneidmassen. Sie ermöglichen es, die dynamischen lichtoptischen Fähigkeiten des natürlichen Zahns zu kopieren.



OE 1, OE 2, OE 3, OE 4, OE 5, OE violet

IPS Style® Ceram
Transpa

IPS Style Ceram Transpamassen stehen in unterschiedlichen Farbnuancen zur Verfügung. Mit ihnen können farblich transparente Bereiche speziell im inzisalen Drittel naturgetreu nachgebildet werden. Der Anteil an Oxyapatit-Kristallen ist hier besonders gering, da wenig Opazität, dafür aber hohe Transluzenz erforderlich ist.



T neutral, T clear, T blue, T brown-grey, T orange-grey

IPS Style® Ceram
Special Incisal


IPS Style Ceram Special Incisal-massen können entweder der IPS Style Schneidemasse zur Modifizierung und Intensivierung beigemischt oder unvermischt aufgetragen werden.



SI yellow, SI grey

IPS Style® Ceram
Inter Incisal

IPS Style Ceram Inter Incisal dient der Steigerung des Helligkeitswertes im inzisalen Drittel. Sie wird in angelegter Schmetterlingsform direkt auf das Dentin aufgetragen.

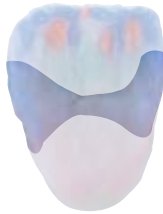

II white-blue

IPS Style® Ceram
Cervical Transpa

IPS Style Ceram Cervical Transpa-massen reproduzieren Farben mit einer intensiveren Transluzenz und unterstützen den natürlichen Übergang von der Gingiva zur Verblendung.



CT yellow, CT orange-pink,
CT khaki, CT orange

IPS Style® Ceram
Incisal

IPS Style Ceram Incisal-massen sind dem natürlichen Schneidemas material nachempfunden und führen in Kombination mit den Dentinmassen zur korrekten A-D-Farbschlüsselfarbe.



I BL, I 1, I 2, I 3, I 4, I 5

IPS Style® Ceram
Incisal Edge

IPS Style Ceram Incisal Edge dient der Erzielung des sogenannten Halo-Effektes, der beim natürlichen Zahn durch die Lichtbrechung an der Inzisalkante hervorgerufen wird.



Incisal Edge

IPS Style® Ceram Occlusal Dentin

IPS Style Ceram Occlusal Dentinmassen dienen der Individualisierung insbesondere im okklusalen Bereich. Sie können auch im zervikalen, palatinalen und lingualen Bereichen eingesetzt werden.



OD orange, OD brown

IPS Style® Ceram Gingiva


IPS Style Ceram Gingivamassen sind speziell eingefärbte Keramikmassen zur natürlichen Rekonstruktion der Gingiva-Anteile. Sie sind auf das Farbkonzept Gingiva Solution von Ivoclar Vivadent abgestimmt und ermöglichen eine naturgetreue Ästhetik dank der umfangreichen Auswahl an Gingiva- und Intensive Gingiva-Farben.



BG34, G1, G2, G3, G4, G5, IG1, IG2, IG3, IG4, IG5

IPS Style® Ceram One

IPS Style Ceram One ist eine Einschichtkeramik, die in Farbe und Transluzenz speziell für die vollenanatomische Gestaltung in der Einschicht-Technik geeignet ist. Sie ermöglicht schnelles und unkompliziertes Schichten.

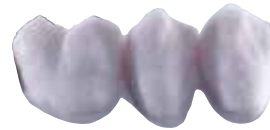

One BL, One 1, One 2, One 3, One 4, One 5, One 6, One 7

IPS Style® Ceram Add-On

IPS Style Ceram Add-On-Massen dienen der Korrektur von z.B. Kontaktpunkten, Pontic-Auflagen oder Schulterpassungen. IPS Style Ceram Add-On Margin, Dentin, Incisal und Bleach werden zusammen mit dem Glanzbrand und Add-On 690°C nach dem Glanzbrand verwendet.



A-O Margin, A-O Dentin, A-O Incisal, A-O Bleach, A-O 690°C

Materials Overview

IPS Style®



**MAKE IT
STYLE!
YOUR!**

Product description:

IPS Style® Ceram

Powder Opaquer / Paste Opaquer

IPS Style Ceram Opaquer is available in paste and powder form. Thanks to its high content of oxyapatite crystals, the opaque ceramic material ensures good masking of the metal framework.

IPS Style® Ceram

Intensive Powder Opaquer / Paste Opaquer

IPS Style Ceram Intensive Powder Opaquer and Intensive Paste Opaquer are opaque ceramic materials that are suitable for the individualization of the basic opaquer shade. They provide an illusion of depth in labial and occlusal areas in situations where space is limited.

IPS Style® Ceram

Margin

The IPS Style Ceram Margin materials demonstrate a somewhat higher opacity and more fluorescence than the IPS Style Ceram Dentin materials and thus enable the design of ceramic shoulders.

IPS Style® Ceram

Intensive Margin

The IPS Style Ceram Intensive Margin materials are used for the individualized design of the ceramic shoulder. They can be mixed with the Margin materials or applied directly.

Example of use:



Shade range:

O BL1/BL2, O BL3/BL4, O A1, O A2, O A3, O A3.5, O A4, O B1, O B2, O B3, O B4, O C1, O C2, O C3, O C4, O D2, O D3, O D4, O pink

IO white, IO violet, IO brown, IO incisal

MBL, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7

IM yellow, IM orange-pink, IM opaque, IM orange

IPS Style® Ceram
Deep Dentin

The IPS Style Ceram Deep Dentin materials are opaque, shaded dentin materials to be used in areas with limited layer thickness. They assist you in masking light-optical refractive edges and achieving true-to-nature results.



DD BL1/BL2, DD BL3/BL4, DD A1, DD A2, DD A3, DD A3.5, DD A4, DD B1, DD B2, DD B3, DD B4, DD C1, DD C2, DD C3, DD C4, DD D2, DD D3, DD D4

IPS Style® Ceram
Dentin

The shade and translucency of the IPS Style Ceram Dentin materials have been adjusted to simulate natural dentin. They permit the correct reproduction of the selected dentin shade.



D BL1, D BL2, D BL3, D BL4, D A1, D A2, D A3, D A3.5, D A4, D B1, D B2, D B3, D B4, D C1, D C2, D C3, D C4, D D2, D D3, D D4

IPS Style® Ceram
Mamelon

The IPS Style Ceram Mamelon materials are intensive, opaque effect materials for the accentuation of the incisal third. Depending on the working habits of the user, the material is applied in thin stripes on reduced dentin.



MM light, MM salmon, MM yellow-orange

IPS Style® Ceram
Opal Effect

The IPS Style Ceram Opal Effect materials are specially shaded incisal materials that permit the simulation of the dynamic photo-optical capabilities of the natural tooth.



OE 1, OE 2, OE 3, OE 4, OE 5, OE violet

IPS Style® Ceram
Transpa

The IPS Style Ceram Transpa materials are available in different shade nuances. They are suitable to reproduce shaded, transparent areas, particularly in the incisal third. This material features a very low content of oxyapatite crystals since its purpose is to increase translucency rather than heighten opacity.



T neutral, T clear, T blue, T brown-grey, T orange-grey

IPS Style® Ceram
Special Incisal

The IPS Style Ceram Special Incisal materials may either be mixed with IPS Style Incisal materials to modify and intensify the shade or applied directly.



SI yellow, SI grey

IPS Style® Ceram
Inter Incisal

IPS Style Ceram Inter Incisal is used to increase the brightness value of the incisal third. It is applied directly on the dentin in an implied butterfly shape.



II white-blue

IPS Style® Ceram
Cervical Transpa

The IPS Style Ceram Cervical Transpa materials reproduce the shades with a more intensive translucency and support the natural transition from the gingiva to the veneer.



CT yellow, CT orange-pink,
CT khaki, CT orange

IPS Style® Ceram
Incisal

The IPS Style Ceram Incisal materials are modelled according to the natural incisal material. In combination with the Dentin materials, they help achieve the correct A–D shade.



I BL, I 1, I 2, I 3, I 4, I 5

IPS Style® Ceram
Incisal Edge

The IPS Style Ceram Incisal Edge material is used to achieve what is known as the halo effect, which occurs in natural teeth by the refraction of light at the incisal edges.



Incisal Edge

IPS Style® Ceram
Occlusal Dentin

The IPS Style Ceram Occlusal Dentin materials are used to apply individual characterizations particularly in the occlusal area. They can also be used in the cervical, palatal and lingual areas.



OD orange, OD brown

IPS Style® Ceram
Gingiva

The IPS Style Ceram Gingiva materials are specially shaded ceramic materials for the lifelike reconstruction of gingiva components. They are coordinated with the Gingiva Solutions shade concept from Ivoclar Vivadent and allow true-to-nature esthetics to be achieved due to the comprehensive selection of Gingiva and Intensive Gingiva shades.



BG34, G1, G2, G3, G4, G5, IG1, IG2, IG3, IG4, IG5

IPS Style® Ceram
One

The shade and translucency of the IPS Style Ceram One single-layer ceramic materials are particularly suitable for creating full-contour restorations using the single-layer technique. They permit quick and uncomplicated layering.



One BL, One 1, One 2, One 3, One 4, One 5, One 6, One 7

IPS Style® Ceram
Add-On

The IPS Style Ceram Add-On materials are used for the adjustment of, e.g. contact points, pontic rests or the accuracy of fit of shoulders. IPS Style Ceram Add-On Margin, Dentin, Incisal and Bleach are used in conjunction with the Glaze firing and Add-On 690°C after the Glaze firing.



A-O Margin, A-O Dentin, A-O Incisal, A-O Bleach, A-O 690°C