

NEU

IPS Ivocolor

Universelle Malfarben und Glasuren



Eine für alle



ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Eine Malfarbe für alle IPS-Keramiken*

individualisieren
IPS e.
Zenostar®
IPS Style®
flexibel
Keramik
IPS Empress®
IPS Empress®
IPS d.SIGN®
IPS InLine®
ästhetisch
effizient
bemalen
Malfarbe
IPS InLine®
effizient
universell
vielseitig
IPS e.max®
IPS Classic®
Zenostar®
Malfarbe



* mit Ausnahme von unkristallisierten IPS e.max CAD- und CAD-on-Restorationen

flexibel
max[®]
individualisieren
Essence
Glaze
color universell
ästhetisch
IPS d.SIGN[®]
IPS Style[®]

IPS Ivocolor ist das universelle Malfarben- und Glasursortiment für die Press-, CAD- und Schichtkeramiken von Ivoclar Vivadent und für Zenostar[®] von Wieland Dental. Der Zahntechniker benötigt nur noch ein Sortiment für die individuelle Charakterisierung und Glasur zahntechnischer Restaurationen. Dies steigert die Effizienz, erhöht die Wirtschaftlichkeit im Labor und führt zu Restaurationen von gleichbleibend hoher Qualität.

Welche Vorteile bringt IPS Ivocolor dem Zahntechniker?

- Individuelle Freiheit bei der Charakterisierung dank ausgewählter Farbkompositionen
- Vereinfachtes Handling dank einer neuen Pastenrezeptur
- Hochglanz schon bei einer Brenntemperatur von 710 °C
- Unverfälschte Glanzergebnisse – keine Grau- oder Weissverfärbung
- Für hoch- und niedrigschmelzende IPS-Keramiken geeignet



IPS Ivocolor Shade

Farbanpassung: schnell, einfach, schön



Mit IPS Ivocolor Shade-Pasten zur passenden A–D-Zahnfarbe:

- 9 ideal abgestimmte IPS Ivocolor Shade Dentin-Farben für hohe Effizienz bei der Farbgebung
- 3 IPS Ivocolor Shade Incisals für natürlich wirkende Schneideanteile
- Einfache Applikation und homogener Farbauftrag dank neuer Gelstruktur
- Besonders geeignet für die Bemalung monolithischer Restaurationen
- Fluoreszenz variiert in Abhängigkeit von der Farbe

IPS Ivocolor Shade Dentin



Shade Incisal



Farbliche Abtönung mit Shade Dentin-Farben



Shade Incisals für den Schmelzbereich




IPS Ivocolor Essence

Effekte, Akzentuierungen und Abtönungen:
getreu dem Vorbild der Natur



IPS Ivocolor Essence bietet individuelle Freiheit bei der Charakterisierung:

- Fein gemahlene Gläser für homogene Malfarben
- Für jede Anforderung die passende Farbe dank 23 ausgewählter Essence-Pulver
- Vielfältige Verarbeitungsoptionen dank Pulverform
- Spezielles Essence Fluid für pastöse Konsistenz
- Fluoreszenz variiert in Abhängigkeit von der Farbe

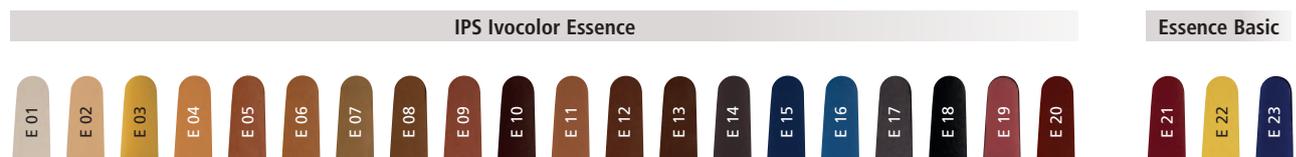

Individuelle Oberflächenbemalung



Farbeffekte bei der Schichttechnik



IPS Ivocolor Glaze

Der neue Glasur-Standard



IPS Ivocolor Glaze für farblich unverfälschte Brennergebnisse:

- Hochglanz mit nur einem Brand
- Einheitlicher Glanz, unabhängig vom keramischen Untergrund (z. B. cut back)
- Keine Grau- oder Weiss-Verfärbung
- Glasuren mit und ohne Fluoreszenz-Effekt
- Erhältlich als Pulver und als Paste

Eine Glasur für hoch- und niedrigschmelzende
Keramiken



Hochglanz schon bei einer Brenntemperatur
von 710 °C



IPS Ivocolor und Programat®-Brennöfen

Damit gute Brennergebnisse kein Zufall bleiben, steht die Programat®-Ofenreihe von Ivoclar Vivadent zur Verfügung.

- Komfortable Programmauswahl dank hinterlegter IPS Ivocolor-Brennprogramme
- Eine Brenntemperatur für den Malfarben- und Glasurbrand in Mal- und Cut-back-Technik
- Gleichbleibende Brennergebnisse dank exakter Temperaturführung und homogener Temperaturverteilung

Der patentierte Zahnfarbassistent DSA des Brennofens Programat® P710 von Ivoclar Vivadent ermöglicht die digitale Feststellung der Zahnfarbe des Patienten durch den Abgleich des gewählten Farbschlüssel-Werts mit dem natürlichen Zahn.



1. Erste Vorauswahl der drei ähnlichsten Zahnfarben.



2. Zähne und Zahnfarbschlüssel abfotografieren und Daten via SD-Karte, WLAN oder USB-Stick ins Gerät übertragen.

3. Farbanalyse-Modus wählen, Fotos einlesen und digitale Zahnfarbestimmung starten. Auch die Helligkeit und Farbsättigung (L-, A- und B-Werte) können dargestellt werden.



Lieferformen

IPS Ivocolor Starter Kit

5x IPS Ivocolor Shade
5x IPS Ivocolor Essence
1x IPS Ivocolor Glaze Powder
1x IPS Ivocolor Glaze Paste
1x IPS Ivocolor Mixing Liquid allround
1x IPS Ivocolor Essence Fluid
1x IPS Ivocolor Shade Guide – Shade
1x IPS Ivocolor Shade Guide – Essence

IPS Ivocolor Shade Kit

9x IPS Ivocolor Shade Dentin
3x IPS Ivocolor Shade Incisal
1x IPS Ivocolor Glaze Paste
1x IPS Ivocolor Glaze Paste FLUO
1x IPS Mixing Liquid allround
1x IPS Mixing Liquid longlife
1x IPS Ivocolor Shade Guide – Shade

IPS Ivocolor Essence Kit

23x IPS Ivocolor Essence
1x IPS Ivocolor Glaze Powder
1x IPS Ivocolor Glaze Powder FLUO
1x IPS Ivocolor Mixing Liquid allround
1x IPS Ivocolor Essence Fluid
1x IPS Ivocolor Shade Guide – Essence

Einzelrefills

IPS Ivocolor Shade

Gebrauchsfertige Pasten
in 9 Dentin- und 3 Schneidefarben
Lieferform: Dosen zu 3 g

IPS Ivocolor Essence

Malfarben-Pulver
in 23 verschiedenen Einfärbungen
Lieferform: Dosen zu 1,8 g

IPS Ivocolor Glaze Paste /FLUO

Glasur-Pasten
mit oder ohne Fluoreszenz-Effekt
Lieferform: Dosen zu 3 g und 9 g

IPS Ivocolor Glaze Powder /FLUO

Glasur-Pulver
mit oder ohne Fluoreszenz-Effekt
Lieferform: Dosen zu 1,8 g und 5 g





Festsitzende Prothetik

IPS Ivocolor ist ein Produkt aus der Kategorie „Festsitzende Prothetik“. Produkte aus dieser Kategorie decken den Prozessablauf bei der Fertigung der festsitzenden Prothetik ab – von der provisorischen Versorgung bis zur Pflege der Restauration. Die Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine erfolgreiche Verarbeitung und Anwendung.



DIES SIND WEITERE PRODUKTE AUS DIESER KATEGORIE:

IPS e.max®-System

all ceramic – all you need



Eine Gesamtlösung für alle Indikationen

- Hochfeste und hochästhetische Materialien für Press- und CAD/CAM-Technologie
- Einzigartiges Lithium-Disilikat (LS₂) und Zirkoniumoxid (ZrO₂): vom dünnen Veneer bis zur weitspannigen Brücke
- Flexible Befestigung: adhäsiv, selbstadhäsiv und konventionell

Programat®

Brenn- und Pressöfen für hohe Ansprüche



Bewährte Technologie mit vielen Innovationen

- Ausgezeichnete Brenn- und Pressergebnisse
- Ideal auf Keramikmaterialien von Ivoclar Vivadent abgestimmt
- Einfache Bedienung

Sie wollen mehr über Produkte aus der Kategorie „Festsitzende Prothetik“ wissen? Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner von Ivoclar Vivadent oder informieren Sie sich auf: www.ivoclarvivadent.com

Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG
 Bendererstr. 2
 9494 Schaan
 Liechtenstein
 Tel. +423 235 35 35
 Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland
Ivoclar Vivadent GmbH
 Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
 73479 Ellwangen, Jagst
 Tel. +49 7961 8890
 Fax +49 7961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

681428/2015-06/de

ivoclar
vivadent[®]
 passion vision innovation