

^{SR} Vivodent[®] DCL / ^{SR} Orthotyp[®] DCL



Die bewährte Linie
– in erweiterter Qualität und Farbauswahl



SR Vivodent® DCL / SR Orthotyp® DCL

Klinisch erfolgreich und jetzt erweitert

Die neuen SR Vivodent DCL / SR Orthotyp DCL Zahnlinien bestehen aus dem hochwertigen DCL-Material (Double-Cross-Linked). Das Spektrum der A–D Farben und den trendigen Bleach-Farben ergänzt die anspruchsvollen Einsatzmöglichkeiten dieses hochwertigen Zahnersatzes.

Damit Sie Ihren Patienten mit natürlich wirkenden Restaurationen zum Lächeln bringen können.



SR Vivodent DCL / SR Orthotyp DCL bieten Ihnen

- Besonders hochwertiger DCL-Werkstoff
- In Chromascop-, A–D- und Bleach-Farben erhältlich
- Authentisches Schichtdesign
- Grosses Formenspektrum
- Farbanalogie zur festsitzenden Prothetik bei A–D Farben

Die moderne Zahnmedizin bewegt sich mit grossen Schritten in die Zukunft – und die wird von den steigenden Qualitätsansprüchen unserer Patienten bestimmt.


Deshalb legen wir grossen Wert darauf, selbst den bewährten Produkten unseres Hauses immer wieder neue Aufgaben zuzuführen und sie damit am Puls der Zeit zu halten – denn Qualitätssicherung heisst auch, sich zu verbessern, wo es möglich ist.

für immer anspruchsvollere Aufgaben

Biokompatibles DCL-Material

Die Basis von SR Vivodent DCL / SR Orthotyp DCL ist der Double-Cross-Linked Werkstoff. Toxikologische Untersuchungen bestätigen die Biokompatibilität dieses hochwertigen Kunststoffes.

- Gewebefreundlich
- Abrasionsfest
- Plaqueresistent
- Farbstabil
- Hohe Schleiffestigkeit
- Ausgezeichnet polierbar
- Guter Verbund zu Prothesenbasismaterial

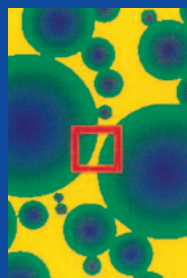

- Matrix
homogenes, vernetztes Polymer
- Füller
unlösliche, quellbare, vernetzte PMMA-Kugel
- Diffusions-schicht
in die vernetzte Kugel eingedrungene Matrix

Breites Farbspektrum



SR Vivodent DCL SR Orthotyp DCL

Farben

- Chromascop
- A-D
- Bleach BL

Material

- DCL

Teil-Zahnersatz



Kombinierter Zahnersatz



Implantat-Zahnersatz abnehmbar



Hybrid-Zahnersatz



Totaler Zahnersatz



Harmonische Formen für natürliche Vorbilder

Die charakteristische Form der SR Vivodent DCL und SR Orthotyp DCL lässt sich im Mund des Patienten harmonisch an die natürliche Umgebung anpassen.

Das aufwändige Schichtdesign der Seitenzahnlinie ermöglicht eine besonders natürliche Ästhetik.

SR Vivodent® DCL / SR Orthotyp® DCL

Biofunktionelles Prothetik System



Der Einsatz der SR Vivodent DCL / SR Orthotyp DCL Seitenzahnlinie ist vielfältig und lässt sich gut mit dem Qualitätszahnersatz BPS kombinieren.

Hinter dem Biofunktionellen Prothetik System stehen Forscher und Fachleute, die das Wissen ihrer Fachbereiche zu einem durchdachten Konzept zusammengefügt haben.

BPS ist ein Markenprodukt, das durch das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten ein besonders effektives Arbeiten ermöglicht.

BPS ist praxisorientiert und bietet fundierte Schulungen mit Zertifikat sowie persönliche Beratung und Betreuung bei allen Fragen.

Aus hochwertigem DCL-Material

Lieferformen SR Vivodent DCL

24 obere Frontzahnformen
8 untere Frontzahnformen



Lieferformen SR Orthotyp DCL

5 untere Seitenzahnformen
5 obere Seitenzahnformen



Farben:

20 Chromoscop
16 A-D Farben
4 Bleach BL

Physikalische Werte:

Biegefestigkeit (DIN 13907)	100 MPa
Biegemodul (DIN 13907)	3'300 MPa
Vickershärte HV 0,5/30 (Interne Norm PV-324)	200 MPa
Verbund zu Heisspolymerisat (DIN 13914)	130 MPa