

# IPS Style®

Die erste patentierte Metallkeramik mit Oxyapatit

MAKE IT YOUR!  
STYLE YOUR!



# STYLE.

## *365 Tage Metallkeramik*

Metallkeramik ist in vielen Laboren noch immer ein täglicher Begleiter. Die Anwendung ist inzwischen selbstverständlich, Ergebnisse sind vorhersehbar. Ihre klinische Bewährtheit überzeugt. Letztlich trägt sie wesentlich zum Erfolg eines Labors bei.

Mit 40 Jahren Erfahrung im Bereich Metallkeramik knüpft Ivoclar Vivadent an gesammeltes Wissen an:

**IPS Style ist eine Metallkeramik, die es so noch nicht gab.**

**Make it your Style.**



## Was ist das Besondere bei IPS Style®?

IPS Style® ist die erste patentierte Metallkeramik mit Oxyapatit-Kristallen. Diese werden mit den bereits bekannten Leuzit- und Fluorapatit-Kristallen kombiniert. Durch abgestimmte Glasphasen sind Handling und optische Eigenschaften dieser niedrigschmelzenden Mischglaskeramik einzigartig.


IPS Style ist nicht nur schnell und einfach, sondern auch höchstästhetisch: Die Keramik für den klassischen WAK-Bereich ist abgestimmt auf das universelle Malfarben- und Glasursortiment IPS Ivocolor.

## Was bedeutet das?

Der geringe Schrumpfung spart Zeit. **Make it fast.**


Die einfache Anwendung gibt Sicherheit. **Make it easy.**

Der Oxyapatit kontrolliert Transluzenz und Tiefenwirkung. **Make it natural.**

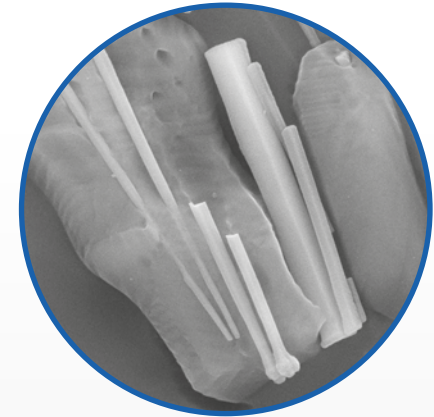


### Drei wichtige Kristalle in einer Rezeptur:

**Nadelförmiger Oxyapatit**  
Gezielte Steuerung von Transluzenz bzw. Opazität  
(10'000-fache Vergrößerung)

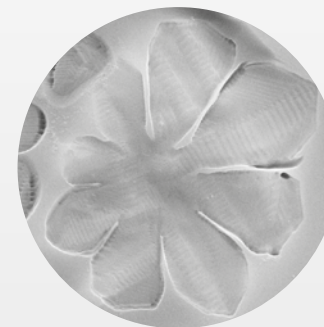

**Kristalliner Leuzit**  
Kontrollierte Expansion und Festigkeit  
(8'200-fache Vergrößerung)

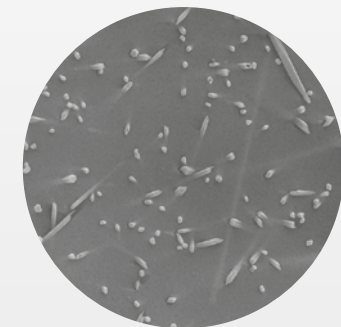

**Feinnadeliger Fluorapatit**  
Natürliche Grundhelligkeit, Vitalität und Ausdruckskraft  
(10'000-fache Vergrößerung)

# MAKE IT FAST.

*IPS Style® ist schnell...*

## Optimiertes Schrumpfverhalten

Die optimierte zahntechnische Schrumpfung von IPS Style führt in kurzer Zeit zum gewünschten Ergebnis. Bereits nach dem ersten Brand entspricht es nahezu der Endkontur.



Klassische Metallkeramik



IPS Style®

Schrumpfverhalten der Keramik und Benetzung des Opakers im Vergleich: IPS Style® zeigt unter standardisierten Testbedingungen\* nach einem Brand ein sichtbar besseres Brennergebnis als eine klassische Metallkeramik.

\* Quelle: F&E, Ivoclar Vivadent, Schaan, 2015

## Hohe Kantenstabilität

Die modellierte Form, ausgearbeitete Details und die Morphologie bleiben während der Brände erhalten. Das verringert die Brandanzahl und spart somit wertvolle Zeit.



“ *IPS Style ist ein sehr ästhetisches Material mit einer besonderen Helligkeitwirkung. Ich schätze auch die einfache Modellierbarkeit des Materials und die geringe Schrumpfung. Dadurch können Restaurationen einfacher und stressfreier hergestellt werden. Dies ist ein Riesenvorteil!* ”



ZT Gérald Ubassy,  
Laboratoire dentaire et Centre  
de Formation International,  
Frankreich

... und noch schneller

## Schichten mit nur einer Masse

Bereits die IPS Style-Schichtmassen für die klassische Mehrschicht-Technik erleichtern den Alltag erheblich. Für noch mehr Effizienz sorgt die Einschichtmasse IPS Style Ceram One.

Hier sind Dentin- und Schneidmassen ideal miteinander kombiniert. So ist die vollanatomische Gestaltung metallkeramischer Restaurationen noch unkomplizierter – für eine natürliche Farbgebung und Transluzenz.

## Solide Kristallbasis

Die beiden IPS Style Ceram-Opaker besitzen die selbe chemische Architektur wie die IPS Style-Schichtmassen. Auch in einer sehr dünnen Schichtstärke erreichen sie eine hohe Deckkraft, ob klassisch oder mittels Spray-on-Technik appliziert.

Verantwortlich hierfür sind die Oxyapatit-Kristalle: Ihr Anteil ist im Opaker besonders hoch. Die Kristalle erreichen aufgrund ihres hohen Rückstrahlvermögens eine Leuchtkraft aus der Tiefe - egal, ob der Opaker als Paste oder als Pulver verwendet wird.



ZT Milos Miladinov, Rumänien

“ Mich überzeugen die Kraft und Expressivität der Keramik. IPS Style lebt von der Verbindung des Opakers, der aus der Tiefe wirkt, mit den vielen verschiedenen Schichtmaterialien, die Ästhetik neu definieren. ”



ZTM Christoph Andres,  
Zahntechnik Andres,  
Schweiz

# MAKE IT EASY.

*IPS Style® ist einfach...*

## Exzellente Standfestigkeit, intuitives Handling

IPS Style wird wie jede herkömmliche Metallkeramik verarbeitet.

Der entscheidende Unterschied: eine exzellente Standfestigkeit und einfache Modellierbarkeit des Materials. Die Schichtmassen bleiben wunderbar stehen.

IPS Style unterstützt Neueinsteiger und erfahrene Anwender gleichermaßen in ihrem Arbeitsstil – für überzeugende Ergebnisse.



## ... und vereinfacht den Alltag

### Offen für alle Gerüste

IPS Style eignet sich für alle Gerüste im indizierten WAK-Bereich, egal, mit welchem Verfahren sie hergestellt wurden. Ob Edelmetall oder edelmetallfrei, digital oder analog, gegossen oder gefräst.

Auf edelmetallfreien Legierungen, z. B. Colado® CAD CoCr4 oder Colado® CC, kann IPS Style sogar ohne Bonder zur Verblendung verwendet werden – für uneingeschränkte Funktionalität in wenigen Arbeitsschritten.



Colado® CAD CoCr4-Discs können beispielsweise mit der PrograMill-Fräsmaschine PM7 bearbeitet und anschliessend mit IPS Style® verblendet werden.

### Abgestimmtes Farbschema

Das einheitliche Farbschema der Metallkeramik IPS Style und der Vollkeramik IPS e.max® ermöglicht es, komplexe klinische Fälle mit verschiedenen Materialien ideal zu bearbeiten – für ein harmonisches Gesamtbild.



ZTM Oliver Morhofer; Dr. Baris Yanik, Deutschland

“ *IPS Style ist eine Metallkeramik, die sich mit der Vollkeramik IPS e.max messen kann. Die Kombinationsmöglichkeit unterschiedlicher Werkstoffe, auch im höchästhetischen Bereich, hat mich fasziniert und überzeugt.* ”



ZTM Oliver Morhofer,  
High-Tech-Dental,  
Deutschland

# MAKE IT NATURAL.

*IPS Style® ist ästhetisch...*

## Grenzenlose Farbspiele

In allen farbtragenden IPS Style-Komponenten, vom Opaker bis zur Schneide, sind Oxyapatit-Kristalle enthalten. Dies führt zu einer exzellenten Grundhelligkeit und intraoral zu natürlich wirkenden Ergebnissen. Unabhängig von der Anzahl der Brände überzeugen die hergestellten Restaurationen mit hoher Farbstabilität. Mit der grossen Auswahl an zur Verfügung stehenden Massen erhält Individualität den nötigen Raum.




H. & D. Crescenzo; Dr. Michel Becker, Frankreich





## ... und verleiht ästhetische Tiefenwirkung

### Was bewirken Oxyapatit-Kristalle?

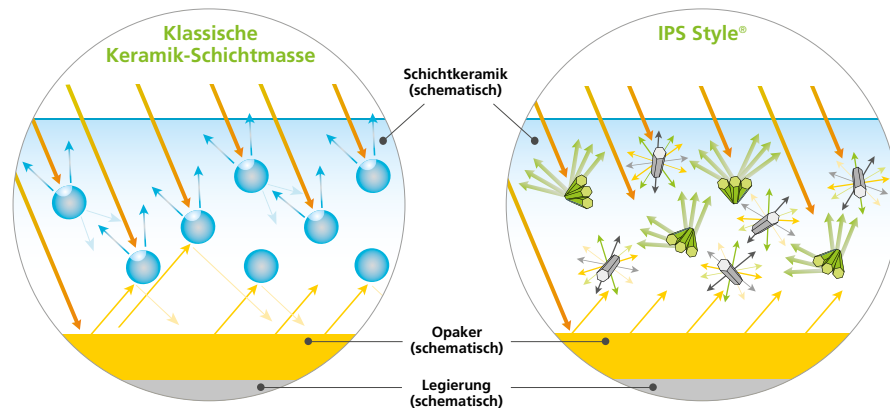


Konventionelle Trübung, verursacht durch einen hohen Anteil an Trübungspigmenten: Einfallendes Licht wird bereits oberflächlich reflektiert und in der Schichtmasse teilweise absorbiert. Das Material wirkt stumpf. Die Farbe des Opakers kann nicht aus der Tiefe wirken.

Trübung, verursacht durch nadelförmige Kristalle: Einfallendes Licht wird gestreut und diffus reflektiert. Das hohe Rückstrahlvermögen der Kristalle bestimmt die Ästhetik und bindet auch die Farbe des Opakers in das Farb- und Lichtmanagement der Restauration ein.

### Material mit hoher Helligkeit

Feinnadelige Fluorapatit-Kristalle führen durch die Streuung und die diffuse Reflexion des Lichts zu einer hohen Helligkeit. Nadelförmige Oxyapatit-Kristalle besitzen ein hohes Rückstrahlvermögen, das Tiefenwirkung erzeugt. Der Gehalt an Oxyapatit-Kristallen variiert vom Opaker bis hin zu den Schneidmassen. In der Opakerschicht ist der Anteil besonders hoch – für eine gezielte Kontrolle der Transluzenz.

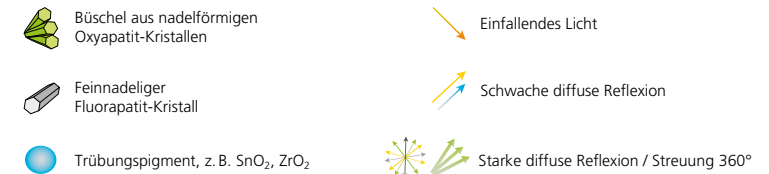

Mit IPS Style zu arbeiten, hat sich von Anfang an gut angefühlt. Die Restaurationen sind sehr hell und haben eine tolle Natürlichkeit. Für uns ist IPS Style als Metallkeramik das Pendant zur Vollkeramik IPS e.max. Mit IPS Style gibt es sehr viel zu entdecken – die Keramik ermöglicht wie IPS e.max sehr viele Techniken.



Hélène & Didier Crescenzo,  
Laboratory Esthetic Oral,  
Frankreich

# MAKE IT UNIQUE.

*IPS Style® ist perfekt für das Labor ...*

## Universelle Malfarben und Glasuren

IPS Ivocolor eignet sich zur individuellen Charakterisierung von IPS Style. Es ist abgestimmt auf alle\* Press-, CAD- und Schichtkeramiken von Ivoclar Vivadent, unter anderem auch auf die Vollkeramik IPS e.max®.



## Intelligenter Brennofen

Für den Brand der IPS Style-Restaurationen sind die entsprechenden Parameter bereits im Programat®-Brennofen hinterlegt.

Bei der Bestimmung der Zahnfarbe unterstützt der Programat P710 zudem mit dem patentierten Digital Shade Assistant (DSA): Er gleicht den gewählten Farbschlüsselwert mit der natürlichen Zahnfarbe ab.

\* nicht auf unkristallisierten IPS e.max® CAD- und CAD-on-Restaurationen



*... und sorgt auch in der Praxis für Perfektion*

## Die passende Befestigung

Mit IPS Style verblendete Restaurationen können effizient mit SpeedCEM® Plus, dem selbstadhäsiven Compositezement, befestigt werden.

Zur Befestigung von Veneers aus IPS Style eignet sich insbesondere Variolink® Esthetic, das ästhetische Befestigungscomposite zur definitiven Eingliederung anspruchsvoller Keramik-Restaurationen.



## Schützende Pflege

Mit IPS Style verblendete Restaurationen müssen ebenso wie Gingiva und Mukosa professionell und langfristig gepflegt werden. Der Schutzlack Cervitec® Plus mit Chlorhexidin und Thymol bietet Intensivschutz im Rahmen der Qualitätssicherung restaurativer Massnahmen.

Cervitec Plus kann in der Praxis gezielt auf Risikostellen, wie z. B. entlang von Kronen- und Brückenrändern appliziert werden.





## Festsitzende Prothetik

IPS Style® ist ein Produkt aus der Kategorie „Festsitzende Prothetik“. Produkte aus dieser Kategorie decken den Prozessablauf bei der Fertigung der festsitzenden Prothetik ab – von der provisorischen Versorgung bis zur Pflege der Restauration. Die Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine erfolgreiche Verarbeitung und Anwendung.



DIES SIND WEITERE PRODUKTE AUS DIESER KATEGORIE:

### Legierungen

Legierungsvielfalt, die verbindet



Kompetenz, Qualität, Vertrauen

- Umfangreiches Legierungsangebot
- Perfekt abgestimmt auf Keramik- und Composite-Verblendwerkstoffe
- Mehr als 100 Jahre Erfahrung mit Dental-Legierungen

### IPS Ivocolor

Universelle Malfarben und Glasuren



Eine für alle

- Vielfältig – kompatibel mit allen IPS-Keramiken\*
- Flexibel – von der Bemalung und Glasur bis hin zum Einmischen in Keramikmassen
- Ästhetisch – natürlich wirkende Farben

\* mit Ausnahme von unkrystallisierten IPS e.max CAD- und CAD-on-Restaurationen

Sie wollen mehr über Produkte aus der Kategorie „Festsitzende Prothetik“ wissen?

Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner von Ivoclar Vivadent oder informieren Sie sich auf: [www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Hersteller und Vertrieb  
**Ivoclar Vivadent AG**  
 Bendererstr. 2  
 9494 Schaan  
 Liechtenstein  
 Tel. +423 235 35 35  
 Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Vertrieb Deutschland  
**Ivoclar Vivadent GmbH**  
 Dr. Adolf-Schneider-Str. 2  
 73479 Ellwangen, Jagst  
 Tel. +49 7961 8890  
 Fax +49 7961 6326  
[info@ivoclarvivadent.de](mailto:info@ivoclarvivadent.de)  
[www.ivoclarvivadent.de](http://www.ivoclarvivadent.de)

Darstellungen und Angaben enthalten keine  
 Zusicherung von Eigenschaften.  
 Gedruckt in Deutschland  
 © Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein  
 681533/de/2018-12

**ivoclar**  
**vivadent**<sup>®</sup>  
 passion vision innovation