

ExcITE® F DSC

Monocomponente de polimerización dual

INNOVADORA TECNOLOGÍA DE PINCEL

ExcITE F DSC – Dual Cure Single Component – es un adhesivo que libera fluoruro de polimerización dual, para la adhesión a esmalte y dentina, que se utiliza en combinación con la técnica de grabado total. Esta última versión de ExcITE F está diseñada, para aquellos casos clínicos en los que no se puede utilizar luz para polimerizar o en aquellos casos en los que se emplean composites que polimerizan químicamente.

ExcITE F DSC consta de un aplicador especial patentado, que está recubierto con los iniciadores requeridos para la polimerización dual. Cuando el aplicador se sumerge en la solución adhesiva, los iniciadores se mezclan con el adhesivo y le confieren las propiedades de polimerización dual.

ExcITE F DSC, al igual que ExcITE F, logra excelentes resultados de adhesión y gracias a su composición química libre de acetona, presenta una muy buena estabilidad de almacenamiento.

Pinzel aplicador cubierto con cristales del iniciador bajo el microscopio electrónico.



FÁCIL APLICACIÓN

La aplicación de ExcITE F DSC es tan sencilla y eficaz como los materiales utilizados en las técnicas de restauración adhesiva directa. El envase monodosis proporciona adhesivo fresco en cada aplicación, sin el riesgo de que el adhesivo se seque. Al igual que con otros muchos sistemas adhesivos, no es necesario prepolymerizar ExcITE F DSC, gracias a lo cual no se compromete el ajuste de la restauración.


Indicaciones

- Cementación adhesiva de restauraciones indirectas realizadas con cerámica o composite, con cementos composite de polimerización dual o autopolimerizables.
- Cementación adhesiva de postes radiculares (p. ej. FRC Postec® Plus)
- Restauraciones directas y realización de muñones con composites de polimerización dual y autopolimerizables (p. ej. MultiCore).
- Resturaciones/cementaciones directas con composites fotopolimerizables (p. ej. Tetric EvoCeram®, Variolink II Base).

Aplicadores en dos formas/tamaños diferentes



Regular (azul claro) para preparaciones normales y Pequeño/Endo (azul oscuro) para microcavidades y conductos radiculares.

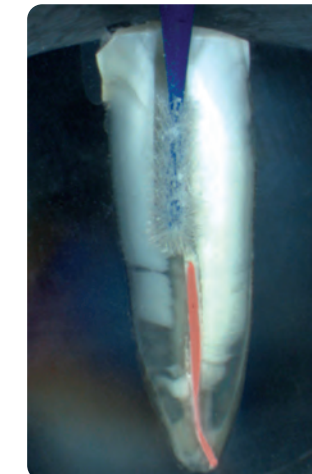

Fácil aplicación de ExcITE F DSC en el conducto radicular con un aplicador Endo.

ExcITE® F

ADHESIVO
FOTOPOLIMERIZABLE
DE GRABADO TOTAL



ExcITE® F DSC

ADHESIVO DE
POLIMERIZACIÓN DUAL
DE GRABADO TOTAL



¡Ahora la adhesión tiene lugar...
con luz y sin ella!

Aplicación clínica



1. Grabado con ácido fosfórico de dentina del conducto radicular y estructura dental remanente.
2. Lavado del espacio del poste.
3. Posterior secado, p. ej. con puntas de papel.



4. Aplicación de Excite F DSC durante 10 segundos con una aplicador Small/Endo y secado.
5. Cementación del poste y realización del muñón con Multicore Flow.
6. Poste acabado y muñón.

Cortesía de Dr. R. Watzke, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein.

ExcITE® F

Una fuerte adhesión es cuestión de química

CÓMODO Y EFICIENTE

ExcITE® F es un adhesivo monocomponente, fotopolimerizable que libera fluoruros, que se utiliza en combinación con la técnica de grabado total. ExcITE F está indicado tanto en la realización de restauraciones directas (composites, compómeros), como en la cementación adhesiva de restauraciones indirectas (cerámica sin metal, composite) que implican fotopolimerización.

ExcITE F está disponible en el sorprendente envase VivaPen, en frascos y en recipientes Soft Touch™ Single Dose.



Fuente: Dr A Peschke, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein

Ventajas de VivaPen

- Aplicación fácil y directa en la boca del paciente que ahorra tiempo
- Dosificación exacta y cánula VivaPen especialmente diseñada para ahorrar material.
- Buena accesibilidad a todas las cavidades gracias a las cánulas finas
- Indicador de nivel de material restante
- Alrededor de 120 aplicaciones por cada VivaPen 2 ml

Competence in Composites



OpraDam® Plus



Total Etch



ExcITE® F



Tetric EvoFlow®



Tetric EvoCeram®



bluephase®




OpraPol®

Las descripciones y datos no constituyen garantía de sus propiedades. Impreso en España. © Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein 28.01.2010/05

ExcITE® F & ExcITE® F DSC

Un equipo invencible

FUERTE ADHESIÓN

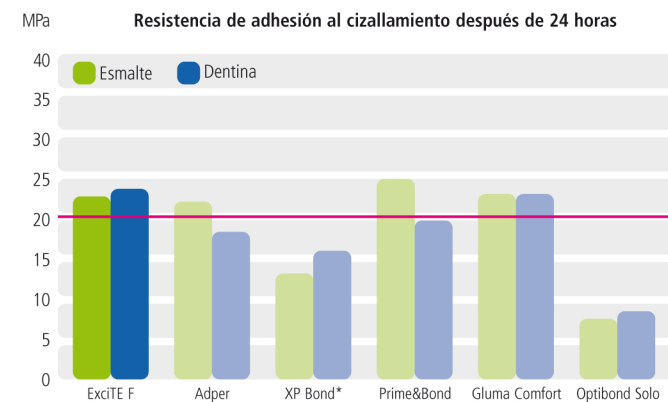

*) Marcas no registradas de Ivoclar Vivadent AG
Fuente: I&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein, Diciembre 2009

Fuerte adhesión a esmalte y dentina

Una única capa de ExcITE F es suficiente para establecer una adhesión de larga duración con la estructura dental.

Química sin acetona

ExcITE F contiene etanol como disolvente, que permite que el adhesivo se pueda almacenar durante periodos de tiempo más largos, sin que ello afecte a su calidad ni resultados de adhesión.

Reducida sensibilidad postoperatoria

La liberación de fluoruro durante los primeros días después del colocar la restauración, ayuda a evitar sensibilidad postoperatoria.

ExcITE F contiene rellenos extremadamente finos (nanorrelenos), gracias a lo cual se distribuye fácilmente sobre la superficie de la cavidad en capas uniformes. Además, durante la aplicación se hace visible una capa brillante en la superficie, lo que permite la revisión visual del recubrimiento uniforme de las áreas dentinarias y adamantinas.

Sistema versátil

Siempre y cuando se haya fotopolimerizado previamente, ExcITE F también se puede utilizar para colocar restauraciones indirectas. Su delgado grosor de película permite un amplio espacio para el cemento utilizado en procesos de cementación.



Ventajas de ExcITE F

- Altos valores de adhesión a esmalte y dentina
- Calidad consistente, gracias a su química libre de acetona
- Reducida sensibilidad postoperatoria, gracias al sellado efectivo de las superficies dentinarias
- Disponible en VivaPen, frascos y monodosis, Single dose Soft Touch

Suministro*

ExcITE F

VivaPen		Intro Pack	627177AN
2 ml	ExcITE F		
100	VivaPen snap-on cánulas		
20	VivaPen fundas		
2 g	Total Etch		
10	Tips aplicación Total Etch		
Refill/1			613724AN
2 ml	ExcITE F		
100	VivaPen snap-on cánulas		
20	VivaPen fundas		
Refill/3			626969AN
3 x 2 ml	ExcITE F		
300	VivaPen snap-on cánulas		
60	VivaPen fundas		
VivaPen accesorios			
	Refill VivaPen snap-on cánulas/100	627178AN	
	Refill VivaPen fundas /300	627492AN	

Soft Touch Monodosis

Refill		
50 x 0.1 g	ExcITE F	630377AN

Ventajas de ExcITE F DSC

- Fácil de usar, gracias al pincel patentado recubierto de los iniciadores
- Basado en la tecnología de ExcITE F, aportando así las comprobadas propiedades físicas
- Sin necesidad de fotopolimerización previa
- Higiénica presentación en monodosis

Frasco

Refill			630375AN
5 g	ExcITE F		
Refill			630376AN
2 x 5 g	ExcITE F		
Accesorios frascos			
	Refill Aplicador regular/50		631699AN

ExcITE F DSC

Soft Touch monodosis

Refill Regular			630378AN
50 x 0.1 g	ExcITE F DSC		
Refill Small/Endo			630380AN
50 x 0.1 g	ExcITE F DSC		

* La disponibilidad de las diferentes formas de suministro puede variar de un país a otro

Para más información sobre los productos, contacte con Ivoclar Vivadent o directamente en nuestra página web.



Forma parte de nuestra área "Expertos en composite". Los productos de esta área se encuentran perfectamente coordinados entre sí.



Forma parte de nuestra área "Expertos en cerámica Total". Los productos de esta área se encuentran perfectamente coordinados entre sí.

Ivoclar Vivadent S.L.U., 24 Carretera de Fuencarral, 24 Edif. Europa I - Portal 1 - Planta Baja 28108 - Alcobendas (Madrid) Telf: +34 913 757 820 Fax: +34 913 757 838 Info.es@ivoclarvivadent.com www.ivoclarvivadent.es

Ivoclar Vivadent AG Bendererstrasse 2 FL-9494 Schaan Principality of Liechtenstein Tel. +423 / 235 35 35 Fax +423 / 235 33 60 www.ivoclarvivadent.com

ivoclar vivadent®
passion vision innovation